

► Enfermedades clínicas comunes

	Test	Muestra	Volumen	Tiempo	Rango	Calificación
Diabetes	HbA1c	WB	10µL	10 mins	4%-14%	CE, NMPA, NGSP
Vitamina	25-OH-VD	S/P	100 µL	10 mins	5-100 ng/ml	CE, NMPA
Función tiroidea	T3	WB/S/P	100 µL	10 mins	1-10 nmol/L	CE, NMPA
	T4	WB/S/P	100 µL	10 mins	20-320 nmol/L	CE, NMPA
	TSH	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,1-100 mIU/L	CE, NMPA
	FT3	WB/S/P	100 µL	10 mins	1,5-50 pmol/L	CE, NMPA
	FT4	WB/S/P	100 µL	10 mins	3-100 pmol/L	CE, NMPA
	β-HCG	WB/S/P	100 µL	10 mins	2-50000 UI/L	CE, NMPA
Fertilidad	LH	WB/S/P	100 µL	10 mins	1-100 mIU/mL	CE, NMPA
	FSH	WB/S/P	100 µL	10 mins	1-100 mIU/mL	CE, NMPA*
	PROG	WB/S/P	100 µL	10 mins	1,4-60 ng/ml	CE, NMPA
	TESTO	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,2-15 ng/ml	CE, NMPA
	prl	WB/S/P	100 µL	10 mins	1-200 ng/ml	CE, NMPA
	AMH	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,1-16 ng/ml	CE, NMPA*
Hormona	Cortisol	WB/S/P	100 µL	10 mins	50-1000 nmol/l	CE, NMPA
Cardíaco	CK-MB	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,3-100 ng/ml	CE, NMPA
	NT-proBNP	WB/S/P	100 µL	10 mins	18-35000 pg/mL	CE, NMPA
	cTnl	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,1-50 ng/mL	CE, NMPA
	mio	WB/S/P	100 µL	10 mins	2-400 ng/ml	CE, NMPA
	PCR-us	WB/S/P	10 µl	3 mins	0,5-200 mg/L	CE, NMPA
Coagulación	Dímero D	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,2-10 mg/L	CE, NMPA
Inflamación	PCR	WB/S/P	10 µl	3 mins	0,5~150 mg/L	CE, NMPA
	PCT	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,1-100 ng/ml	CE, NMPA
	IL-6	WB/S/P	100 µL	10 mins	3~4000 pg/mL	CE, NMPA
	IgE total	WB/S/P	100 µL	10 mins	1-2000 UI/mL	CE, NMPA*
Tumoral	AFP	WB/S/P	100 µL	10 mins	10-300 ng/ml	CE, NMPA*
	CEA	WB/S/P	100 µL	10 mins	2,5-400 ng/ml	CE, NMPA*
	PSA	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,5-100 ng/ml	NMPA*
	fPSA	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,2-30 ng/ml	NMPA*
	CA125	WB/S/P	100 µL	10 mins	2-2500 U/mL	CE, NMPA*
	CA19-9	WB/S/P	100 µL	10 mins	0,6-1000 U/mL	CE, NMPA*
	CA15-3	WB/S/P	100 µL	10 mins	5-300 U/mL	CE, NMPA*
Anemia	FER	WB/S/P	100 µL	10 mins	5-1500 ng/ml	CE, NMPA

WB: Sangre Entera S: Suero P: Plasma * En curso: E2, Dengue NS1, Malaria pf/pv, VB12, Folato, Anti-CCP, ASO, RF

All rights reserved. Specifications subject to change without prior notice

Version 2.0

Genrui Biotech Inc.

4-10F, Edificio 3, Parque Tecnológico Geya, Distrito de Guangming, 518106, Shenzhen, China
+ 86-755-26678255 + 86 755 26678789
info@genrui-bio.com www.genrui-bio.com



FA. 50

Analizador de inmunoensayo cuantitativo



SUPERIOR EN CALIDAD Y MÁS

► Analizador de inmunoensayo de fluorescencia

Portátil

Dimensión: 300 mm (longitud) x 70 mm (ancho) x 160 mm (alto)
Peso: solo 4 Kg



Libre de Mantenimiento

Sistema libre de líquidos, cero mantenimiento

Interfaz de Usuario

Calibración de un solo paso con tarjeta magnética
Dos modos de lectura: estándar para tiempo de incubación automático y modo rápido para un lote de muestras tomando el tiempo de incubación por fuera.
5 temas de diferentes colores
11 idiomas disponibles

Inmunoensayo de fluorescencia

Mayor vida útil.
Mayor especificidad.

Potente funcionalidad

2-2 puertos USB, Ethernet, conexión LIS
Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas en sistema Linux
Gráfico Lewey Jenning disponible
Impresora interna o externa

► Incubadora(opcional)


Proporciona un mejor control de la temperatura para la incubación.



► Procedimiento de prueba



Calibración de tarjeta magnética

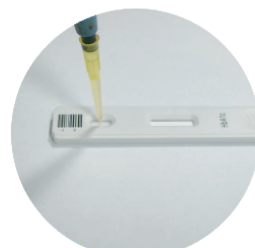

Muestra de pipeta



Insertar casete



Resultado

► Ventajas técnicas

5 ventajas principales de la plataforma FA



► Aplicaciones



Laboratorio



Clínicas



Ambulancia



Urgencias



UCI y UCC



UCC



Departamentos para pacientes ambulatorios



Departamento de Endocrinología



Centro de Control de Infecciones