

PA. 54

Analizador de Proteínas Específicas




Características Generales

Pantalla táctil de 5.6 pulgadas
Calibración por tarjeta magnética
4 canales independientes
Cuvetas desechables, no hay arrastre
Puede ampliarse a más de 30 parámetros
Soporta LIS y códigos de barras
Mantenimiento mínimo

Componente Volumen Parámetro	Buffer	Diluyente	Latex	Muestra	Anti-Suero
CRP	600µL	-----	-----	2µL	60µL
HS-CRP	600µL	-----	-----	2µL	60µL
HbA1c	-----	1000µL	300µL	20µL	100µL
mALB	400µL	-----	-----	20µL	40µL
ASO	300µL	-----	-----	5µL	100µL
RF	300µL	-----	-----	5µL	100µL
CCP	350µL	-----	-----	10µL	50µL
D-Dimer	300µL	-----	-----	6µL	100µL

Procedimiento en 3 simples pasos

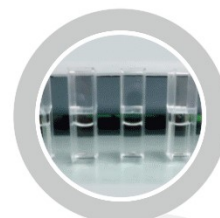

Uno

Colocar la barra magnética y el buffer en la cuveta



Dos

Pipetear la muestra en la cuveta



Tres

Pipetear el anti suero en la cuveta

Especificaciones Técnicas

Principio	Nefelometría
Rendimiento	160 muestras/hr.
Parámetros	HS-CRP, CRP, HbA1c, mALB, D-Dimer, CCP, RF, ASO, CYS-C, IgA, IgM, IgG, C3, C4, etc. Puede extenderse a más de 30 Parámetros
Tipo de muestra	Sangre total, suero, plasma, orina etc.
Fuente de luz	Diodo láser, longitud de onda de 650nm
Cuveta	Cuvetas desechables
Calibración	Tarjeta magnética, resultados mas exactos
Canales de Prueba	4 canales independientes
Tiempo de reacción	1.5-3 min
Idioma	Multilinguaje, español incluido
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5.6 pulgadas
Memoria	Almacenaje de 100,000 resultados
Impresión	Impresión manual y automática, impresora térmica
Temperatura de operación	10~30°C
Precisión	CV 5%
Fuente de poder	AC 100-240V 50/60Hz
Tamaño	345mmX 352mmX 180mm
Peso neto	5.4kg
Soporta LIS y código de barras	
Certificación NGSP	

